


Vitamina D

Test quantitativo da sangue capillare

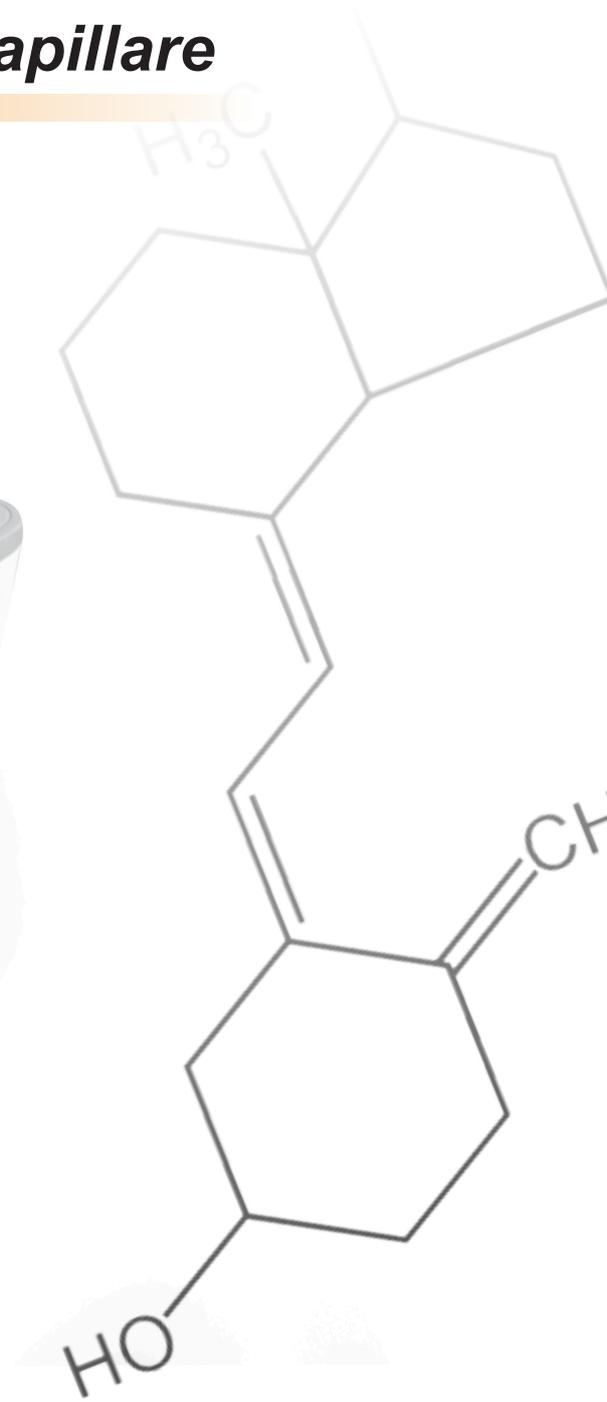

Analizzatore Point of Care di Vitamina D per sangue capillare

- ▶ Risultati quantitativi
- ▶ Tipo di campione: sangue capillare, sangue venoso, siero, plasma
- ▶ Volume di campione: 20 μ L
- ▶ Tempo di analisi: < 15 minuti


Utilizzo semplice e rapido




1. Inserisci il chip per la calibrazione



2. Preleva il sangue capillare e aggiungilo al reattivo

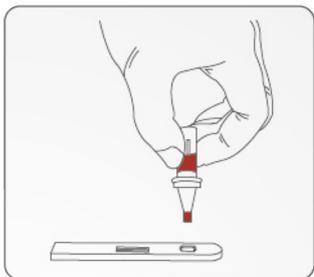

3. Aggiungi la miscela alla card e avvia il test

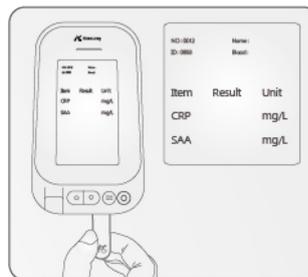

4. Leggi i risultati dopo 15 minuti

Caratteristiche Tecniche

Range di misura: 5 - 120 ng/mL

Volume di campione: 20 µL

Tempo di analisi: <15 minuti

Valori di riferimento:

<20 ng/mL deficiente

20 - 30 ng/mL insufficiente

30 - 100 ng/mL normale

>100 ng/mL potenzialmente tossica

Memoria: 2000 risultati

Dimensioni: 96x96x184 mm

Peso: 700 g

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Codice	Descrizione	Test/Kit
OVD-402F-25	VIT D 25-OH-Vitamin D	25
COMPASS3000-2	Fluorescence Immunoassay Analyzer Compass 3000	-

Distribuito in Italia da

MINIAS GLOBE DIAGNOSTICS SRL

Via Ancona 11R - 17100 Savona
Tel. 019/824844 - Fax. 019/829481
Email: info@minias.it